

Amputaatiotyngän iskusoijan käyttöohje

Iskusoojaa käytetään yhdessä hoitotupen kanssa



Iskusoija muodostuu kahdesta osasta:
Varsinainen iskusoija ja metallinen
kiinnitystappi




Iskusoija voidaan toimittaa myös
kokonaisuutena, eli tappi kiinnitettynä
iskusoijaan.



Käytettäessä iskusojaa ensimmäistä kertaa uuden hoitotupen kanssa, on kiinnitystappi ruuvattava hoitotupen kärkeen. Tämä tapahtuu pyörittämällä irrallinen tappi hoitotupen kärjen kierteisiin (kuva 3.), tai irrottamalla tappia iskusojasta (kuva 4.)




Iskusoija irrotetaan hoitotupesta painalla iskusoijan kyljessä oleva painike pohjaan (kuva 5.), pitämällä painike pohjassa ja samanaikaisesti vetämällä iskusoija irti. Irrotettuasi iskusoijan varmista, että metallitappi on kierretty pohjaan saakka. Kiinnitystappi jätetään kiinni hoitotuppeen.

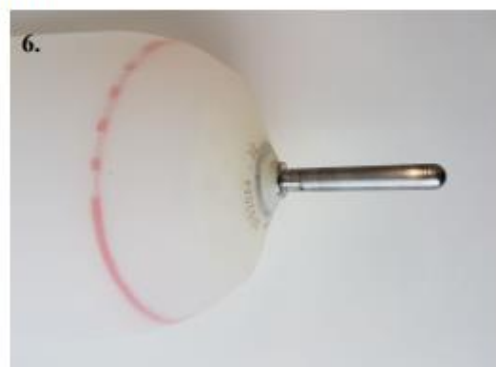


Hoitotuppi puetaan ja riisutaan ilman iskusuoja.



Hoitotupen pukemisen jälkeen iskusuoja painetaan paikoilleen, pohjaan saakka (kuva 8.).

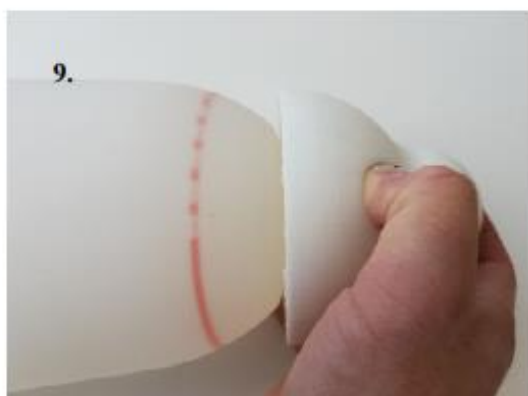

Iskusuoja irrotetaan hoitotupesta ennen tupen riisumista tyngästä. Iskusuoja irrotetaan painamalla vapautuspainikkeesta ja samanaikaisesti vetämällä iskusuoja irti.

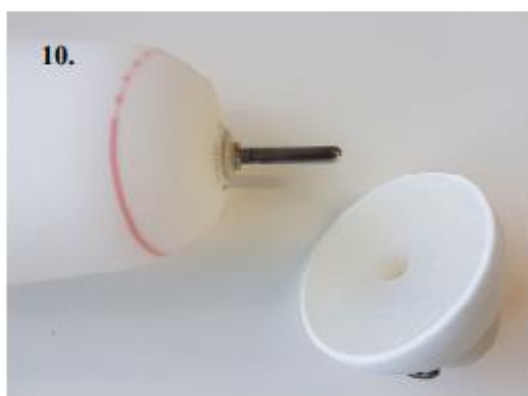

Iskusuoja voidaan tarvittaessa puhdistaa miedolla pesuaineella tai desifiointiaineella kastetulla kankaalla pyyhkimällä.

Iskusuojan lukon kastumista tulee välttää, sillä pitkäaikainen altistuminen kosteudelle voi heikentää tappilukituksen toimintaa.