

Haavadreenin kanssa kotiin

Sinulle on laitettu leikkauksessa dreeni eli laskuputki, jota kautta veri ja kudoserite poistuvat leikkausalueelta. Dreeni poistetaan yleensä viimeistään 14 vuorokauden kuluttua leikkauksesta, kun eritteen määrä on vähentynyt.

Dreeni on ompeleella kiinni. Sidosten poistamisen jälkeen voit käydä normaalisti suihkussa. Kuivaa dreenin juuri suihkun jälkeen huolellisesti ja vaihda puhdas sidos dreenin juurelle. Vaihtoehtoisesti suihkuun mennessä voit suojata dreenin juuren vettä läpäisemättömällä kalvolla. Dreenin kanssa et voi mennä saunaan, kylpyyn tai uimaan.

Pidä dreenin keräyspussia haavakohtaa alempana ja tarkista, ettei letku taitu kaksin kerroin ja erite pääsee valumaan keräyspussiin.

Imun aktivointi: mikäli dreenissä oleva pallo täyttyy ilmalla, purista se kasaan, jotta imu aktivoituu uudelleen. **HUOM. Lääkäri on voinut määrätä dreenin pidettäväksi ilman aktiivista imua. Tällöin dreenissä olevaa palloa ei puristeta kasaan.**

Keräyspussin vaihto (keräyspussi ilman tyhjennysventtiiliä): aktivoi imu, jotta palloon kertynyt erite tyhjenee pussiin. Sulje alin sulkija. Poista pussi kiertämällä. Kiinnitä uusi pussi huolellisesti kiertäen.

Keräyspussin tyhjennys (pussi, jossa tyhjennysventtiili): aktivoi imu, jotta palloon kertynyt erite tyhjenee pussiin. Sulje alin sulkija. Tyhjennä keräyspussi sen tyhjennysventtiilistä.

Katso pussin kyljestä olevasta mitta-asteikosta dreenierityksen määrä ja kirjoita se muistiin. Tyhjennä dreeni kerran päivässä suunnilleen samaan aikaan. Eritteen voit tyhjentää wc-pönttöön.

Haavadreeni poistetaan lääkärin ohjeen mukaan joko ____/____ tai kun erityksen määrä on alle _____ ml/vrk kahtena peräkkäisenä päivänä. **Varaa itse aika omalle terveysasemallesi sairaanhoitajalle dreenin poistoa varten.**


Ota yhteyttä omalle terveysasemallesi, jos

- haavadreeni ei toimi tai irtoaa
- haavassa on verenvuotoa, joka ei lakkaa
- haavassa on voimakasta kuumotusta, turvotusta tai punoitusta
- haavassa on siteen läpi tulevaa kosteutta tai pahaa hajua tai sinulle nousee kuumetta
- kipu haavassa lisääntyy tai on pitkäaikaista
- Suosittelemme yhteydenottoa sähköisesti osoitteessa hyvaks.fi/asioi-sahkoisesti Sivustolle pääset myös QR-koodin kautta.



Näin aktivoit Redax™ -dreenin imun


1.

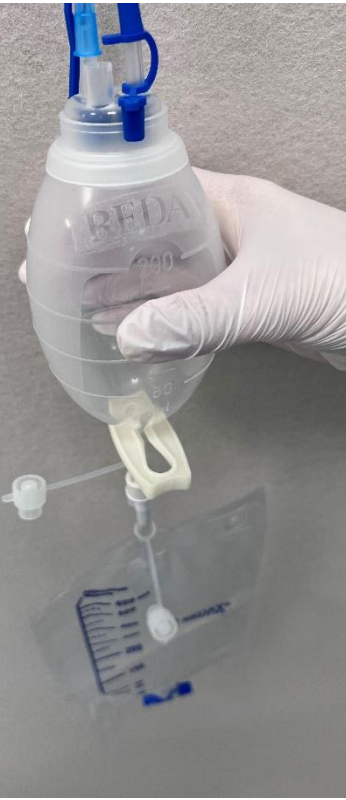

2.





3.

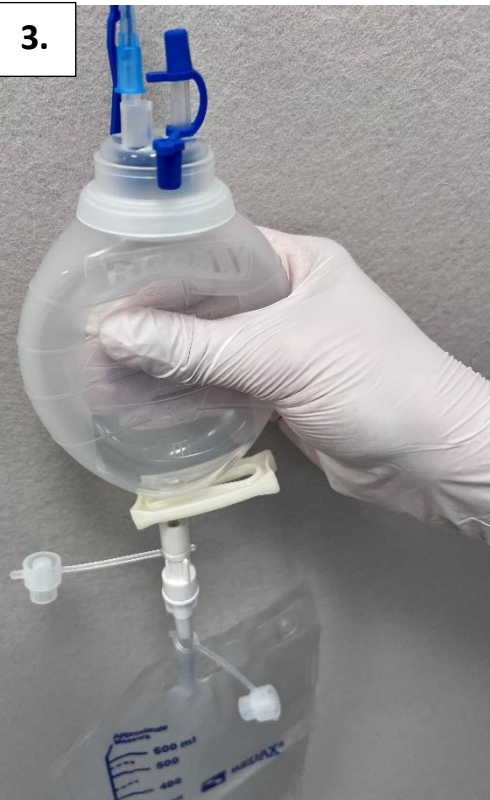

1. Dreenin pallo on täyttynyt ilmalla ja/tai eritteellä. Valkoinen alin sulkija on kiinni.
2. Avaa pallon alla oleva valkoinen sulkija. Aktivoi imu puristamalla pallo kasaan, jolloin erite valuu pallosta pussiin.
3. Pallon yhä ollessa kasaan puristettuna, sulje valkoinen sulkija. Suljettuasi valkoisen sulkijan, voit vapauttaa puristusotteen. Mahdollinen haavaerite alkaa taas kerääntyä palloon. Sulkijaa pidetään kiinni kunnes imu aktivoidaan uudelleen.

Näin aktivoit Exudrain™-dreenin imun:

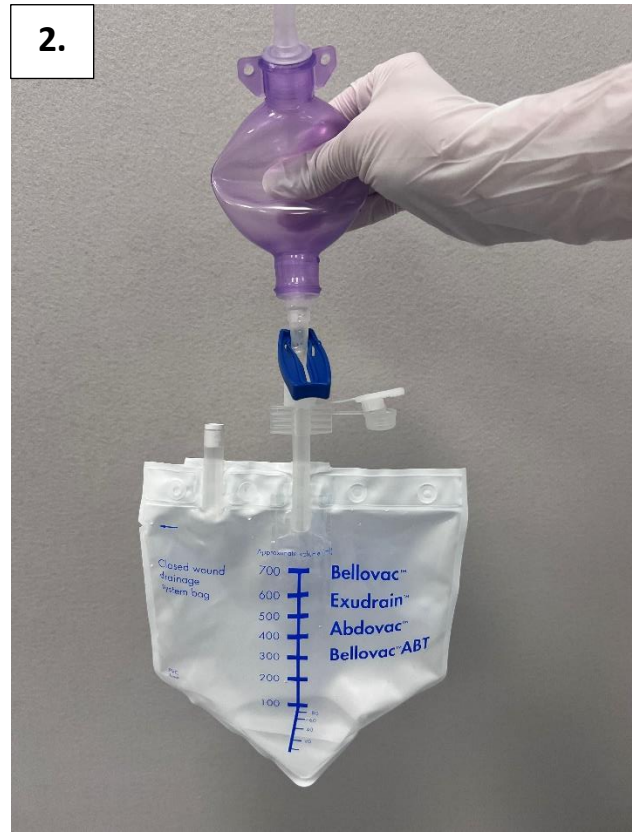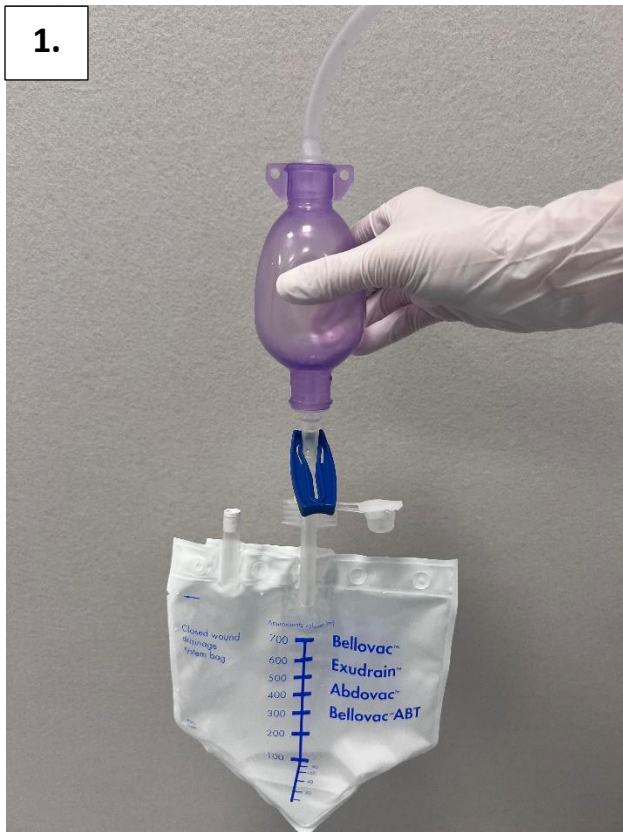

1. Sininen sulkija pidetään aina auki, myös silloin kun imu aktivoidaan.
2. Aktivoi imu puristamalla pallo kasaan, jolloin erite valuu pallosta pussiin.

Pussin vaihdon tai tyhjennyksen yhteydessä sininen sulkija pidetään kiinni. Kun tyhjennys/vaihto on tehty, sulkijan voi avata.